



爆脂仪使用说明书

40KHz Cavitation Slimming Machine

User Manual

QYX-CT20



持有认证：CE, FCC, PSE

Certifications: CE, FCC, PSE

一、概述

爆脂仪 40KHz 聚焦强音波仪器，利用聚集了强烈声波的强声波头发射的频率达 40KHZ 的声波，进入人体后可使人体脂肪细胞产生一种强烈的撞击作用及脂肪细胞间的摩擦运动，能有效消耗热量，消耗细胞的水份，使脂肪细胞缩小，另外当声波震动时能使细胞间产生强裂撞击，细胞瞬间爆破，脂肪细胞减少，从而达到去除脂肪效果。

二、产品说明


- ★震动频率为 40kHz—低频（超声波穿透力强）。
- ★高智能触荧幕操作方式。
- ★手提箱设计概念，携带方便。
- ★时间可调 / 强度可调。

三、规格参数

荧幕	8 " (英寸)LED 彩色显示面板
震头	一个
输入电压	AC 100V - 240V, 50Hz/60Hz
工作电压	DC 12V
消耗功率	10W - 33W
操作频率	40KHz
产品尺寸	360(L)*240(W)*105(H)mm
产品重量	4 KGS

四、面板示意

电源开关

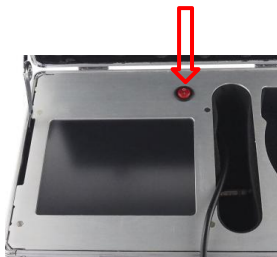

点击界面进入



主操作面板



打开电源总开关，启动爆脂仪

请自右下方选取中文/英文界面，选取确认后，点击中间粉红色/蓝色的按钮进入下个操作

中间显示：

上面为振幅强度增加/减少按钮，下面为时间增加/减少按钮。

左上显示：

机器内部震动频率设定，请勿任意改动（上为基板频率，固定为13Hz；下为震头频率，以我司出厂设定为准）。

右上显示：

触控返回键，返回开机界面。

右下显示：

五、操作说明

- 1、接通电源，打开电源总开关，启动爆脂仪。
- 2、液晶屏显示语言选择，按左右键选择中文及英文，选择完毕后按中间键确定。

3、进入主操作面板后，按上下功能键选择操作流程，按键确定。

(1) 中间显示：上面为震幅强度控制增加/减少触控键。

震度共分为 9 级。

根据顾客承受能力调节能量大小，建议使用：6-8 级。

中间显示：下面为时间控制增加/减少触控键。

初期使用建议时间为 3-5 分钟。

(2) 左上显示：仪器内部震动频率设定请勿任意调动。

上为基板频率固定为"13Hz"。

下为震头频率，依我司出厂设定为准。

(3) 右上显示：触控返回键，返回语言选择界面。


(4) 右下显示：开始 / 停止触控键。

六、针对位置：身体部分

1、大腿

(1) 由大腿内侧→大腿前→大腿外侧顺序向上拉至腹股沟方向，如图 A、B 所示。


(2) 大腿内侧和外侧可用 Z 或用大 8 字手法来回向上推动，如图 C、D 所示。

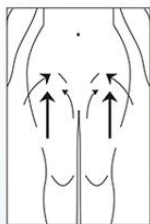


A



B

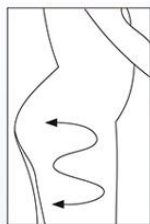


C

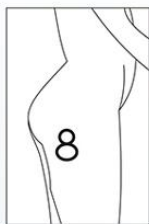

D

2、腹部

- (1) 以打圈的方式，从腰间两侧往中间拉动，如图 E 所示。
- (2) 腰间以打圈的方式，腹股沟斜拉。如图 F 所示。

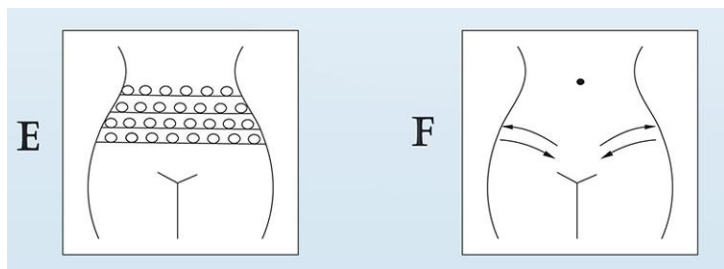

七、注意事项

- 1、仪器属于高精密的电子仪器，在保管和放置的时候，避免放置潮湿位置。
- 2、仪器不能撞击。
- 3、如有下列情况下禁止使用：
 - (1) 电源插头，电线被破损或发烫时；
 - (2) 插孔松动或摇晃时；
 - (3) 禁止破损、加工、过分弄弯、扭插头；
 - (4) 操作当中不要勉强拔插头；
 - (5) 禁止使用其他的电源线；
 - (6) 放置于婴、幼儿接触不到的地方；
 - (7) 禁止用化学药品来擦仪器；
 - (8) 禁止用湿手拔插头；
- 4、禁用人群
 - (1) 严重疾病，如心脏病、胃溃疡、严重胃病、十二指肠溃疡、肾脏不好等避免使用。

- (2) 孕妇、哺乳期妇女，腹部手术不满三个月或经期期间
严禁使用。
- 5、本产品仅限于腹部周遭及大腿内侧使用。严禁使用于骨骼关节与脸部。
- 6、仪器设定如调至高档 7 到 9 档（连续震的情况下），因为震度过大且温度会相应提高，建议使用时间不超过 3-5 分钟(依个人接受程度为准)。
- 7、可直接接触皮肤使用，可搭配个人润滑油使用。

八、维护及保养

- 1、在使用时候和使用完成后，一定要注意维护，以免造成其使用寿命缩短。
- 2、配件要轻拿轻放，一定要注意拿着手柄进行，千万不要随意提着输出线拿放，容易造成配件内部的连接面松动，造成接触不良和短路。
- 3、40KHz 爆脂仪如果连续工作的时间 30 分钟，当工作 30 分钟后，应该让探头休息 5 分钟，待其表面温度降低后，再继续使用，避免烧坏探头。

九、质量保证

持有 CE 认证。认证号码：14KWE091916E

持有 FCC 认证。认证号码：14KWE091919F

持有 PSE 认证。认证号码：14KWE091920J

- 1、本机器自购买日起主机保修一年。
- 2、对以下使用者个人原因造成的故障，不提供免费保修服务：

- (1) 擅自拆装或改装本产品。
- (2) 外力受损或天灾、人为因素受损。
- 3、本公司产品之设计规格如有变更之处恕不另行通知，若有疑问，请与公司联系。

维 修 记 录 表		
产品名称: 购买日期: 保修截止日期:		
经销店名: 地址: 电话:		
顾客店名: 地址: 电话:		
维修日期	故障原因	维修内容
备注:		

1. Overview

The 40KHz Cavitation is the ultrasonic instrument which gathered the strong sound wave head strong acoustic emission frequency of 40000Hz sound waves, after entering the body can make body fat cells to produce a strong impact and friction of motion between fat cells, can heat consumption effectively, water consumption in cells, and then fat cells was reduced, and when the sound wave vibration can make the cell produces strong crack, instantaneous blast cells, fat cells decreased, so as to remove fat effect.

2. Product features

- ★Cavitation Frequency: 40KHz -- Low Frequency.
(Strong penetration of ultrasonic)
- ★High-Intelligent Touch Screen Operation.
- ★Suitcase designed. It's portable and easy to carry.
- ★Time adjustment / intensity adjustment.

3. Specifications

Screen	8"LED touch color screen
Cavitation Head	X 1
Input Voltage	AC 100V~240V, 50Hz/60Hz
Working Voltage	DC 12V
Consumption Power	10W~33W
Cavitation Frequency	40KHz
Power	10~33W
Dimension	360(L)*240(W)*105(H)mm
G.W	4 KGS

4. Operation panel pictures

Switch



Turn on the power switch, start up the device

Press into the next page



Please choose Chinese/English in the bottom right, then press the pink/blue button into the next page

Main operation page



The middle shows:

Intensity control increase/decrease touch keys.

Time control increase/decrease touch keys.

The upper left shows:

The internal vibration frequency setting, please don't change it wilfully (Upper: baseboard frequency -- fixed 13Hz; Lower: vibration frequency -- depends on our factory setting).

The upper right shows:

The turn key -- turn back to the language selection page.

The lower right shows:

Start/stop touch keys.

5. Introduction of operation steps

(1) Connect power supply, turn on the power switch, the device start-up.

(2) LCD display language choice.

Press the left / right button to choose in English / Chinese language, and then enter the next page after confirmation.

(3) After entering the main operation panel, press the function button selection operation as follow:

① The middle shows:

Intensity control increase/decrease touch button.

Vibration amplitude is divided into 9 levels.

According to the customer bear ability to adjust, we suggest to adjust 6-8 levels.

Time control increase/decrease touch keys.

We suggest to adjust :3-5 minutes every in early use.

② The upper left shows:

Do not change the instrument internal vibrations frequency setting.

Upper: baseboard frequency fixed: 13Hz.

Lower: vibration frequency, depends on our factory setting.

③ The upper right shows:


The return key, turn back to the language selection screen.

④ The lower right shows: start / stop touch keys.

6. Use position: Body


(1) The thigh

- ① Inner thigh→thigh→outer thigh pull upward to the groin, as figure A, B shows.
- ② Touch inner and outer thigh back and forth in Z or eight methods as figure C, D shows.

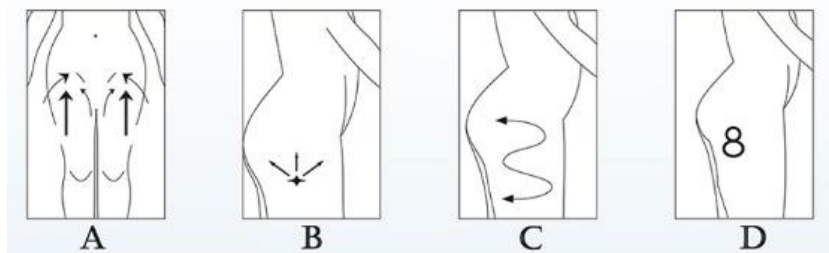

(2) Abdomen

- ① Use from the waist move to the middle in circle way, as figure E shows.
- ② Use from the waist and the groin back and forth, as figure F shows.

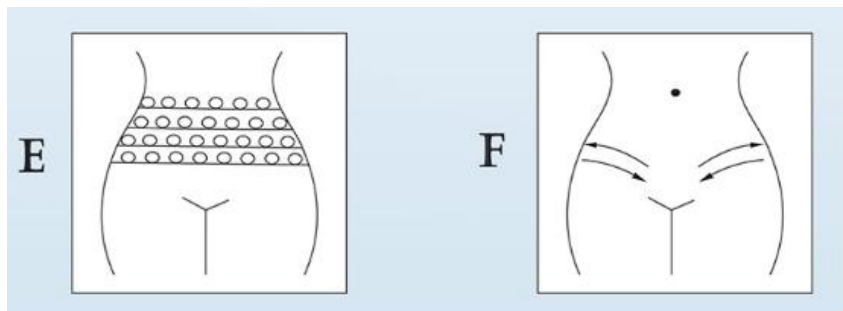

7. Caution

- (1) High precision instrument which avoids placing in the wet location.
- (2) Instrument can't be hit
- (3) It is prohibited from using as below:
 - ① The wire is broken or getting hot.
 - ② Socket is loose or shake.
 - ③ It is forbidden to damage, processing, bend and twist plug too much.
 - ④ Do not pull the plug while operating.
 - ⑤ It is prohibited to use other power cord at the same time.
 - ⑥ Keep out of reach of children/ infant.
 - ⑦ It is prohibited to use chemical to clean the instruments.
 - ⑧ Do not pull out the plug with wet hands.
- (4) People who can not use
 - ① Serious diseases such as heart disease, gastric ulcer, duodenal ulcer, serious tummy bug, kidney is bad, etc.
 - ② It is strictly prohibited for lactating women, abdominal surgery under three months or menstrual period .
- (5) This instrument is limited to use around the abdomen and the thigh. It is forbidden to use in the bone joints and face, etc.
- (6) If the instrument set 7-9 levels(continuous), we suggest that use time no more than 3-5 minutes (in accordance with the individual acceptance), because the higher the vibration, the higher the temperature.
- (7) Contact with the skin directly, use personal skin lubricating

oil.

8. Maintenance

- (1) Please note that it is important to pay attention to maintenance, so as not to cause the shorten product life.
- (2) Cavitation head should be handled with great care, it is noted that using the device with hold the handle, do not pull the output line by intention (it can cause loose part inside the interface, causing poor contact and short circuit).
- (3) If it works 30minutes continuously, after that, we suggest that the head should be stopped in case of overheat.

9. Warranty

CE approval. No.: 14KWE091916E

FCC approval. No.: 14KWE091919F

PSE approval. No.: 14KWE091920J

- (1) Warranty: 12 months.
- (2) For the following user personal causes of the fault, does not provide free warranty service:
 - ① Disassembling or modified the device without authorization.
 - ② The external force damage, or natural disasters, human factors damage.
- (3) No prior notice will be given for any change of products. Please do not hesitate to contact us if you have any further question.

Maintenance		
Product:	Purchasing date:	Expiration date:
Distributor:	Address:	Cell phone:
Client:	Address:	Cell phone:
Date	Fault cause	Content
Remarks:		